

# Procédure installation / Configuration / Utilisation PDA

Cette procédure est faite à titre indicatif, il manque peut-être certains éléments mineurs à rajouter

## 1 – Installation et paramétrage (Windows)

Faire la procédure d'initialisation de Windows classique

Nom de session : Admin / Pas de mdp


Ne pas connecter un compte Microsoft (on doit pouvoir s'en servir hors ligne)

Une fois Windows initialisé :

- Désactiver le mode tablette dans les paramètres




- Cliquer sur « Modifier des paramètres Tablet PC supplémentaires » et cocher la case « Afficher le clavier tactile lorsqu'aucun clavier n'est attaché » (Pour une raison que j'ignore c'est pas tout le temps nécessaire, mais si le clavier n'apparaît pas quand vous désactivez le mode tablette ça devient obligatoire)

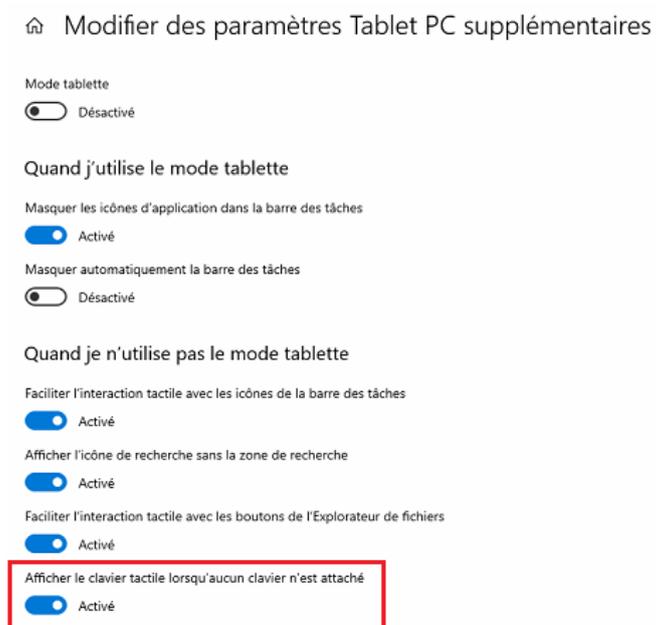


- Verrouiller l'affichage en mode portrait

Taper « Portrait » dans la zone de recherche puis sur « Modifier l'orientation de l'affichage »  
Cochez « Verrouillage de la session » puis sélectionnez l'orientation

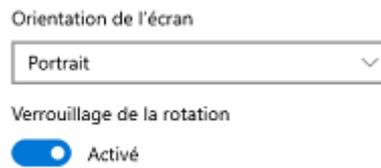

- Ajuster l'heure du PDA (sélectionner le bon fuseau horaire)

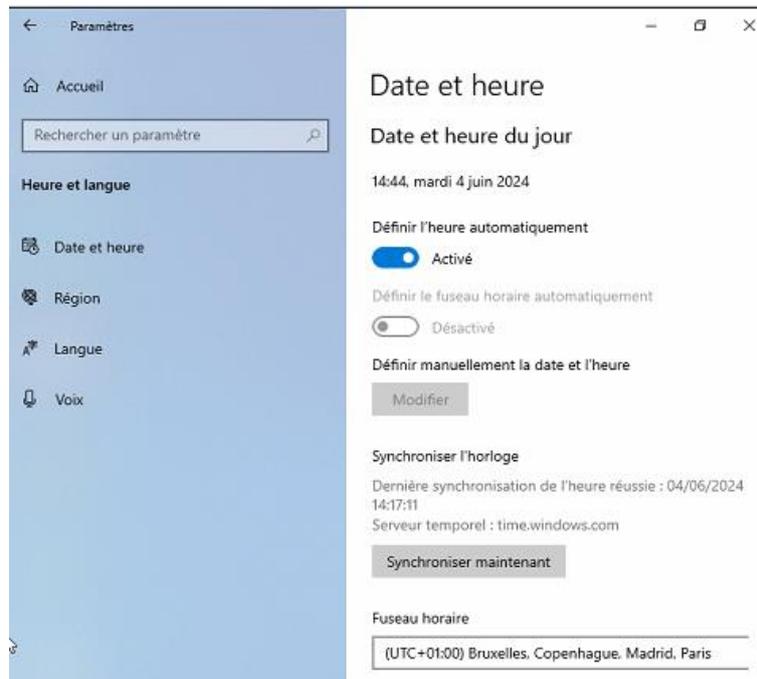

- Renommer le PDA en fonction du client puis ajouter la clé d'activation de Windows (normalement les PDA sont censés arriver en étant activés, voir avec Jérôme si besoin d'une clé)

## 2- Installation et configuration PDA

### 1- Partie logiciel

1) Télécharger TeamViewer HOST sur le PDA et l'installer

2) Récupérer les fichiers nécessaires sur le FTP: <https://support.heitzsystem.com/ftp/materiel/PDA/>

Sur le PDA, transférer :

- Pda.exe
- Pda.exe.conf
- Setup\_PDA

3) Lancer Setup\_PDA et faire l'installation.

4) Modifier le fichier pda.exe.conf et mettre la redirection du client

5) Prendre les fichiers pda.exe.conf modifié et pda.exe et les placer dans C:/Program Files (x86)/Heitz System/program (supprimer setup\_PDA)

6) Créer les raccourcis sur le bureau pour pda.exe et le dossier program (et les ajouter dans la barre des tâches en raccourci rapide – facultatif)

7) Rouvrir TeamViewer et modifier le nom du PDA, noter l'ID et créer un MDP de prise de contrôle rapide dans les paramètres avancé (pensez à le noter dans le Gestiso et à créer les instances dans notre TeamViewer)

8) Virer les raccourcis de la barre des tâches inutiles (mails, etc...)

### 1) Partie fonctionnelle

a- Ouvrir sur votre pc le fichier N431X-UG Rev RT62H 1D instruction.pdf

b- Page 30 : faites scanner au PDA le code barre de configuration du mode Français (ou prendre celui-ci-joint, c'est le même, ayez juste connaissance du document de configuration)




Le scan se déclenche via le 3<sup>ème</sup> bouton de la tranche droite du PDA



Attention sur un écran la détection peut poser problème (se fier au pointeur rouge sur l'écran).

/ ! \ J'ai noté 2 types d'incidents si on ne fait pas cette étape :


- Si on fait pas du tout le scan : les cartes passent mais pour les QRCode on a une erreur au passage

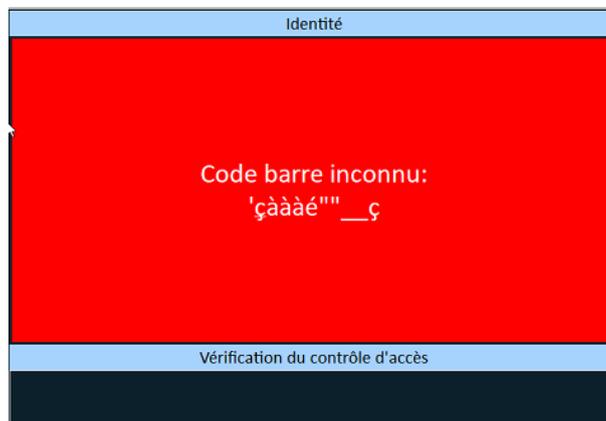


- Si on scan le mauvais code, on a la même erreur que ci-dessus et en plus les cartes ne passent plus

## 2) Interface PDA

### *Interface principale*

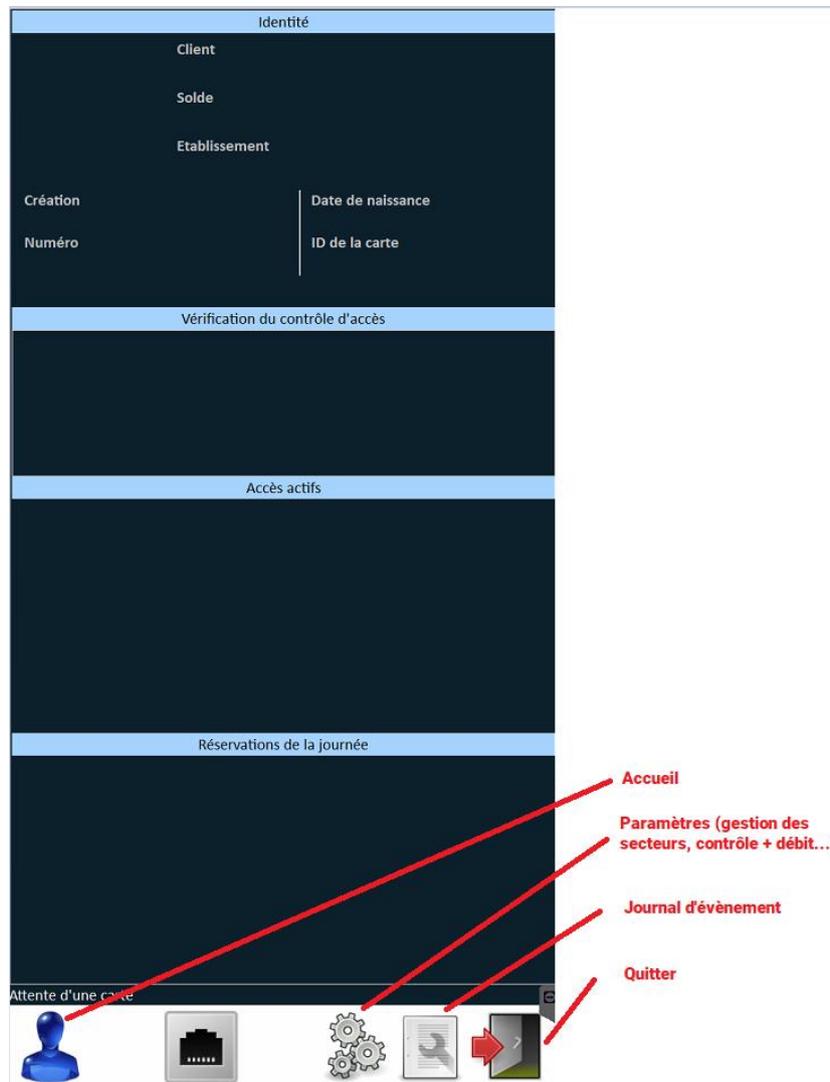

## Paramètres

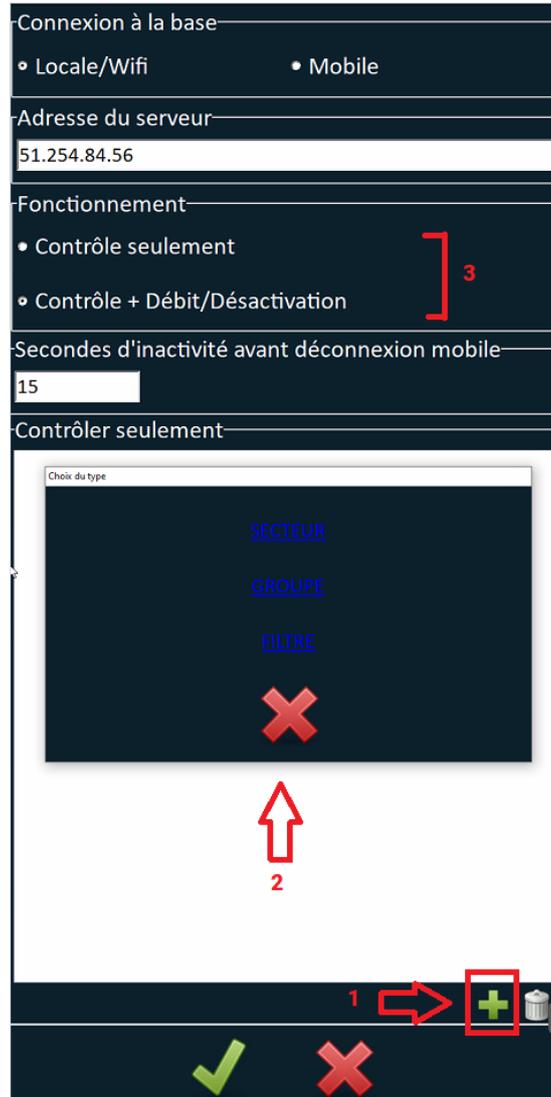

**1** Ajout d'une méthode de filtrage (secteur/groupe/filtre)

**2** Sélection de la méthode

**3** Configuration en contrôle seulement ou ajout du débit au passage (peut varier selon le centre)

**Note** : Actuellement (4/06/2024) seuls les secteurs et groupes sont utilisables, l'utilisation des filtres viendra plus tard.

## Captures d'écran diverses

### Passage carte valide

Identité



Client  
**TEST TEST**

Solde  
**0,00**

Etablissement  
**SERVICE TECHNIQUE**

Création  
**09/06/2021**

Numéro  
**1419000065588**

Date de naissance

ID de la carte  
**4145886362**

Vérification du contrôle d'accès



**10 SEANCES - 12 MOIS**  
**22/08/2022 - 29/08/2024**  
Séances restantes: 1

Accès actifs



**10 SEANCES - 12 MOIS**  
**22/08/2022 - 29/08/2024**  
Séances restantes: 1

Réservations de la journée

Carte insérée (4145886362)



Passage carte non affectée / invalide

Identité

Carte non affectée

Vérification du contrôle d'accès

Accès actifs

Identité

 Client  
TEST TEST  
Solde  
0,00  
Etablissement  
SERVICE TECHNIQUE

Création  
09/06/2021  
Numéro  
1419000065588

Date de naissance  
ID de la carte  
4145886362

Vérification du contrôle d'accès

Plus de séances disponibles.

Accès actifs

10 SEANCES - 12 MOIS  
22/08/2022 - 29/08/2024

QRCode valide/invalide

Identité

Client  
SERVICE TECHNIQUE .  
Solde  
693,60  
Etablissement  
SERVICE TECHNIQUE

Création  
03/07/2020  
Numéro  
1419

Date de naissance  
Code-barres  
1419000234084

Vérification du contrôle d'accès

1 ENTREE - 14 JOURS  
--> Début: 29/05/2024 14:47:44  
--> Fin: 12/06/2024 14:47:43

Accès actifs

10 SEANCES - 12 MOIS  
21/02/2024 - 20/02/2025  
Séances restantes: 10

10 SEANCES - 12 MOIS  
21/02/2024 - 20/02/2025  
Séances restantes: 10

Identité

Client  
SERVICE TECHNIQUE .  
Solde  
693,60  
Etablissement  
SERVICE TECHNIQUE

Création  
03/07/2020  
Numéro  
1419

Date de naissance  
Code-barres  
1419000234084

Vérification du contrôle d'accès

1 ENTREE - 14 JOURS  
--> Début: 29/05/2024 14:47:44  
--> Fin: 12/06/2024 14:47:43

Accès actifs

10 SEANCES - 12 MOIS  
21/02/2024 - 20/02/2025  
Séances restantes: 10

10 SEANCES - 12 MOIS  
21/02/2024 - 20/02/2025  
Séances restantes: 10